

# 昇降式リハビリテーブル SOT-810N/M

## 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。  
「取扱説明書」はいつでも使用できるように、見やすい所に大切に保管してください。


### ● 用途

リハビリ作業用のテーブルです。

### ● 特長

天板の高さを 660～835 mm で変更されます。

天板の角度を 0～63°（無段階）で変更されます。

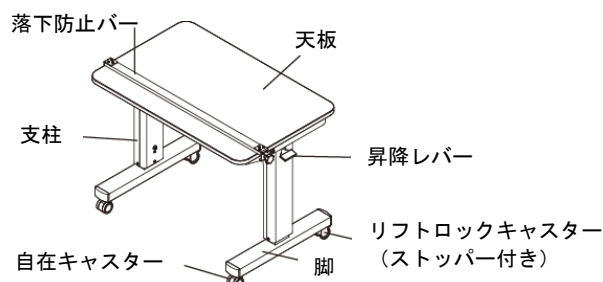

## 安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項を読んで必ずお守りください。  
表示の意味は次のようになっています。

⚠ 警 告 … 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの

⚠ 注 意 … 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害の発生が想定されるもの

### ⚠ 警 告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

### ⚠ 注 意

- 床面が平らな場所に本製品を設置してください。
- 天板に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒したりこわれてけがをすることがあります。
- 天板の外周部に片寄って重い物を乗せないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 天板には耐荷重以上の物を乗せないでください。転倒したりこわれてけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 使用前に各部の点検をして、ガタつきや破損箇所などがいないか確認してください。けがをすることがあります。
- ボルトやねじがゆるんだまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体がこわれてけがをすることがあります。
- 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 落下防止バーは確実に固定してください。物が落下して破損やけがをすることがあります。
- 傾斜させて物を置く際には、使用前に物が落下しないことを確認してからお使いください。事故の原因になります。
- 天板の傾斜操作の際には、ひざや手等が天板に当たらないよう注意してください。けがをすることがあります。
- 天板の昇降・傾斜操作の際に、天板が急激に動かないよう押えながら操作してください。
- 高熱の物を直接天板の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
- 移動するときは2人以上で持ち上げてください。引きずると破損したり床面を傷つけることがあります。
- 直射日光や熱・冷暖房器具の強風を直接当てないでください。本体がゆがんだり変色することがあります。
- 軟質の床面ではカーペットなどを敷いてご使用ください。直に置くと床面に傷やへこみを生じることがあります。

## お手入れの仕方

日常のお手入れとして、汚れがついたときは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
汚れが落ちないときは水拭きした後柔らかい布で乾拭きしてください。

⚠ 注 意 シンナー、ベンジンなどで拭かない  
塗装面を侵す恐れがあるので使用しないでください。

## 操作方法


### ● テーブル本体の設置方法

テーブル本体を所定の位置に移動したら、リフトロックキャスター 2 個を固定してください。(ストップノブのある方です)  
がたつきや傾きが無いように、平らな場所に設置してください。

### ■ キャスターの操作方法


キャスターのストップノブを引き上げると解除され、下げると固定します。

※ノブを下げるとキャスターが床から浮き上がります。

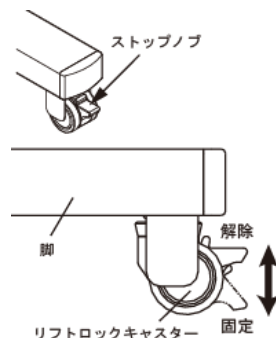

### ● 落下防止バーの取付け・取扱い方法

1. 取付ける前に落下防止バーの固定ノブのネジを緩めてください。
2. 落下防止バーを天板に差し込んでください。
3. 任意の位置まで移動してください。
4. 固定ノブをしっかりと締め込んでください。

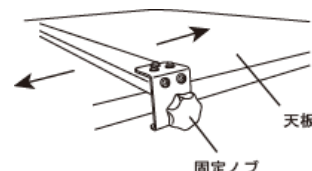

### ● 高さの調整方法


天板の両端を両手でしっかり持ち、昇降レバーをつかみながら昇降させてください。

### ■ 天板の上に重い物を乗せたままですと、スムーズに昇降しなくなります。

物を取り除いてから昇降させてください。

### ■ 納入時及び長時間放置しておくとう動作しない場合があります。

その際は、多少強めに昇降操作すると動作します。

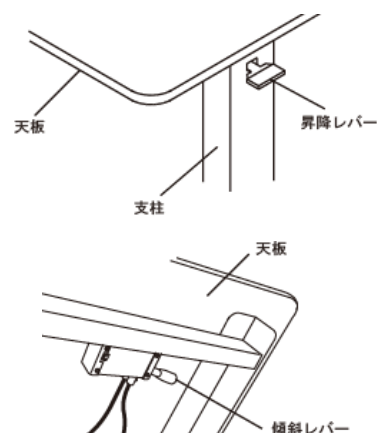

### ● 天板の傾斜方法

天板をしっかり持ち、傾斜レバーを握って任意の角度まで傾斜してください。

傾斜レバーを放すと固定されます。

## アフターサービス

### ● 修理を依頼される場合

- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

機種名: SOT-810 / お買上年月日 / 故障状況(できるだけ詳細に) / 住所、氏名、電話番号

- メーカーより指示のあるとき以外は、決して分解したりしないでください。

### ● 消耗品 (使用により、磨耗・劣化・変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの)

正常な使用において、交換の目安が約 2 年のもの。

キャスター

点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

## 仕様

型 式		SOT-810N	SOT-810M
外形寸法(L×W×H)		880×570×660～835 mm	
傾斜角度		0～63° (無段階)	
質 量		33 kg	
耐荷重		30 kg	
材質	天 板	天然木集成材	メラミン化粧板
	フレーム	鋼板、メラミン焼付塗装	
機能・構成		昇降機構、傾斜機構、落下防止バー、ロック付キャスター (後輪 2 脚)	

注) 都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。

発売元

酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町 358-6 〒162-0801

<http://www.sakaimed.co.jp>

06-078①Q6

お問い合わせ (午前 9:00～午後 5:00)

#### ● 修理に関するお問合せ:

健康被害などが発生した場合:

- ・ サポートセンター フリーダイヤル 0120-161-288
- ・ または、平日のみ最寄りの営業所へ

#### ● 商品に関するお問合せ:

最寄りの営業所